



NEU!

INKL. NEUESTER
APPLIKATOREN

Accent *Prime*

Love Your Shape

KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN FÜR
BESSERE, LANGANHALTENDE ERGEBNISSE

EINFACH ZU BEDIENEN,
PLUG & PLAY TECHNOLOGIE

KEINE TEUREN VERBRAUCHSARTIKEL

SCHMERZFREIES,
ANGENEHMES VERFAHREN

KLINISCH BEWÄHRT IN
ZAHLREICHEN STUDIEN

SIGNIFIKANT KÜRZERE
BEHANDLUNGSZEITEN



MACHEN SIE DAS BESTE AUS IHREN KUNDEN

Almas Accent Prime™ ist das modernste System zur Hautverjüngung sowie zur Formung und Straffung von Gesicht und Körper. Die Plattform vereint die neuesten Entwicklungen aus der Ultraschall- und der Radiofrequenz-Technologie und bietet wirksame, individuell anpassbare Behandlungen mit natürlich aussehenden, langanhaltenden Ergebnissen.

Auf Basis langjähriger Erfahrung und großem klinischem Erfolg im Bereich der Körperformung bietet Alma nun mit Accent Prime die neueste Generation der erfolgreichen Accent-Familie, die gezielt die Fettzellen anspricht und zugleich das Kollagen im Gewebe strafft und durch die Synergie aus verschiedenen Technologien optimale Ergebnisse erzielt.

Dank einer breiten Auswahl an Applikatoren und Behandlungsmethoden können Sie Ihren Patienten individuell zugeschnittene Lösungen je nach Hauttyp und Indikation anbieten. Technologische Innovationen bieten zugleich neues Potential, wie Behandlungen zur Körperformung in beispielloser Geschwindigkeit - für kürzere Behandlungszeiten und noch bessere Ergebnisse.

Accent Prime ist ein System von Alma Lasers, einem der weltweit führenden Anbieter medizinisch ästhetischer Technologien. Die Accent Familie zur Körperformung besitzt bereits seit 2007 die FDA-Zulassung und bietet nachgewiesenen klinischen Erfolg und große Sicherheit für die Patienten. Mit Accent Prime sind Sie und Ihre Kunden stets in guten Händen!

"Die Ergebnisse des Accent Prime sind verblüffend. Bereits nach einer Behandlung mit dem UltraSpeed-Handstück bemerken wir einen deutlichen Umfangsverlust im Bereich des Bauches. Unsere Patienten empfinden die Behandlung als sehr angenehm und schmerzfrei, sie ähnelt einer wärmenden Massage. Auch bei der Hautstraffung sowie bei Kombinationsbehandlungen mit Fadenlifting, Unterspritzung oder nach einer Fettabsaugung erzielen wir gute Erfolge. Der Accent Prime verzichtet zudem auf teure Verbrauchsartikel und ist durch die kurze Behandlungsdauer und das ergonomische Handstück sehr anwenderfreundlich."

Dr. Sophia Bethge, Plastische Chirurgin, Metropolitan Aesthetics, Berlin



NEUESTE ENTWICKLUNGEN

NEU!

Accentuate



Die Freiheit, mehr zu tun

Accentuate ist der neue, bedienerunabhängig arbeitende stationäre Applikator für Body Contouring und Hautstraffung durch gleichmäßige Erwärmung großer Flächen mittels Radiofrequenz. Accentuate ist exklusiv für Almas Accent Prime erhältlich. Durch die spezielle AlmaWave mit 40,68 MHz strafft und formt Accentuate sicher und effektiv große Areale des Körpers, da die RF-Energie wirksam bis tief in die Haut eingebracht wird.

Das Accentuate Set besteht aus zwei Applikatoren, deren Parameter unabhängig voneinander eingestellt werden können. Die Hauttemperatur lässt sich in Echtzeit überwachen und bietet mehr Kontrolle für Anwender und Patient.

Optimale Ergebnisse liefert die Kombination aus Accentuate und UltraSpeed: Die Synergie aus der UniPolar Radiofrequenz-Technologie und der Ultraschall-Technologie erhöht die Wirksamkeit der Behandlung und verbessert die Behandlungsergebnisse signifikant.




UltraSpeed

Das UltraSpeed Handstück kombiniert eine neue Art von nicht-fokussiertem Ultraschall mit einer besonders großen Applikator-Platte zur schnellen Körperformung. Almas modernste Technologie nutzt Kavitation (longitudinale Wellen) und Scher- sowie Flexuralwellen (transversale Wellen) und ist exklusiv für Almas Plattform Accent Prime erhältlich. Die plattenförmige Sonotrode des UltraSpeed gibt in konzentrischer Form geführte Ultraschallwellen auf die gesamte, mit 600 cm² besonders große Behandlungsfläche ab, um das Zielgewebe gleichmäßig zu erwärmen. Simultan bekämpfen diese Wellen wirksam hartnäckige Fettzellen im Zielgewebe. Die Behandlung des kompletten Abdomen dauert mit UltraSpeed nur 20 Minuten, was den Komfort für den Anwender erheblich steigert.



Wärmebilder

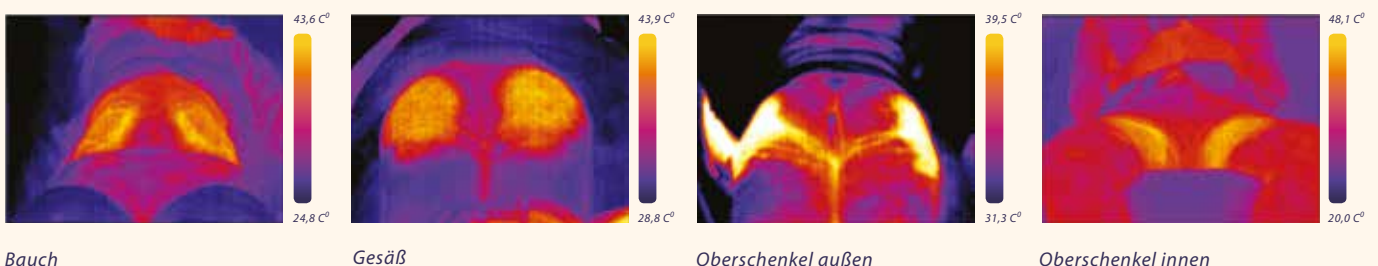

“Nach meiner Erfahrung führt die Kombination aus UltraSpeed und Accentuate zu den besten Behandlungsergebnissen bei großen Arealen am Körper wie Bauch, Oberschenkel oder Po. Nach nur einer Stunde haben meine Patienten deutlich straffere Haut und straffere Konturen. Der Vorteil für mich bei Accentuate ist, dass ich mehrere Patienten gleichzeitig behandeln kann, ohne bei der Behandlung selbst anwesend sein zu müssen.”

Dr. Stefania Enginoli, Studio Medico, Mailand



Vorher



Nach 5 Behandlungen

- 4 cm Umfang am Bauchnabel



Vorher



Nach 2 Behandlungen

- 5 cm Umfang am Bauchnabel

BEHANDLUNGSAREALE



Bauch



Oberschenkel außen



Oberschenkel innen



Gesäß



NEUESTE ENTWICKLUNGEN

NEU!

Almas Lösung für kleine Areale

*Zwei Handstücke.
Eine synergetische Lösung.*

Der Ästhetikmarkt entwickelt sich laufend weiter, analog zu den sich verändernden Bedürfnissen der Patienten. Oft liefern Synergien aus verschiedenen Technologien nicht nur bessere Behandlungsergebnisse, sondern werden diesen Ansprüchen auch effektiver gerecht.

Alma hat ein Behandlungskonzept speziell für kleine Areale entwickelt, das mit den Applikatoren MiniSpeed und TuneFace sowohl Ultraschall-, als auch Radiofrequenz-Technologien umfasst.



BEHANDLUNGS- AREALE

MiniSpeed:

- Submental (unterhalb der Kinnlinie)
- Oberarme, Knie u.a.

TuneFace:

- Submental
- Gesicht



Vorher



Nach 2 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung der Klinischen Abteilung bei Alma



Ein perfektes Paar: MiniSpeed & TuneFace

MiniSpeed basiert auf Almas revolutionärer Ultraschall-Technologie und wurde speziell zur wirksamen, schnellen Behandlung kleiner Areale entwickelt. Als kleinere Variante des erfolgreichen UltraSpeed-Handstücks bringt MiniSpeed über eine Applikatorplatte mit 55 mm Durchmesser geführte Ultraschallwellen in konzentrischen Bahnen in das Gewebe ein. Die schnelle Behandlung reduziert das Volumen von Fettpolstern und strafft die Konturen.

Das Radiofrequenz-Handstück TuneFace zur Hautstraffung im stationären Modus verfügt zusätzlich über einen Vakuum-Mechanismus und ist die ideale Ergänzung der MiniSpeed-Behandlung.

Die Kombination aus MiniSpeed und TuneFace bietet die **ideale Lösung für kleine Areale** und liefert optimale Ergebnisse bei der Fettreduktion und Hautstraffung auf Arealen, die typischerweise nicht leicht zu behandeln sind. Die Synergie beider Handstücke kombiniert das beste aus zwei Welten: zwei unterschiedliche Energiequellen, die jede für sich spezifische Vorteile bietet, wirken zusammen für unvergleichliche Effektivität und beeindruckende, langanhaltende Ergebnisse.

INDIKATIONEN

MiniSpeed:

- Contouring kleiner Areale
- Cellulite-Behandlung
- Hautstraffung

TuneFace:

- Hautstraffung
 - Faltenglättung
-

“MiniSpeed und TuneFace geben mir die Möglichkeit, zwei Technologien sehr wirkungsvoll und gezielt für verschiedene Ansprüche zu kombinieren. Dies gibt mir mehr Kontrolle über die Behandlung, auch bei sensiblen Bereichen, und verbessert die Behandlungsergebnisse meiner Patienten beträchtlich.”


Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Medical Director an der Elite Laser Clinic & Laser Unit, NISA Hospital, Madrid, Spanien

KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN FÜR LANGANHALTENDE ERGEBNISSE

Effektiv *Dielektrische Erwärmung*

Accent Prime nutzt die dielektrische Erwärmung - einen einzigartigen Mechanismus, mit dem Radiofrequenzenergie von 40,68 MHz (40,68 Millionen Schwingungen pro Sekunde) direkt in das Gewebe übertragen wird. Sie verursacht im Gewebe eine schnelle Oszillation der Wassermoleküle, die daraus resultierende Reibung erzeugt **hochwirksame Wärme** genau in der gewünschten Zielstruktur.

Da die Haut vor allem aus Wasser besteht, verursacht diese Erwärmung volumetrische Kontraktionen in der Haut. Dies zieht bestehende Fasern zusammen, stimuliert die Bildung von neuem Kollagen und verbessert seine Dicke und Ausrichtung. Die **tiefe, gleichmäßige Erwärmung** mit Accent Prime erzielt überzeugende, einheitliche Resultate.

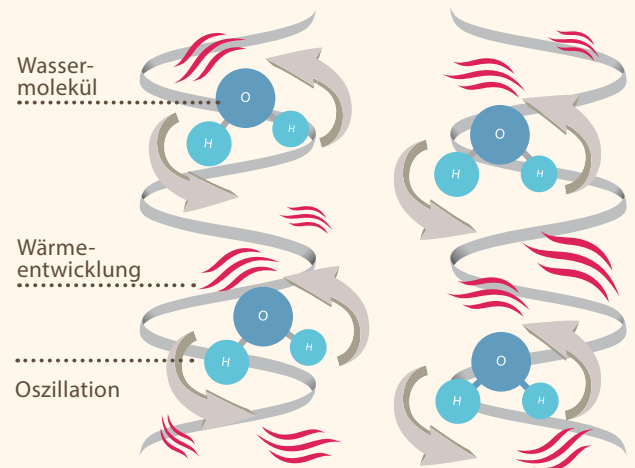

Leistungsstark *Impedanz-Anpassung*

Mit einer hohen Leistung von bis zu 300 Watt und minimalem Energieverlust durch Anpassung an die Impedanz (Wellenwiderstand) der Haut, bietet Accent Prime die maximale Leistung für jede Behandlung. Denn wenn RF Energie an das Gewebe abgegeben wird, führt der Wellenwiderstand des Körpers dazu, dass ein Teil der Leistung an der Haut zurück zur Energiequelle reflektiert und damit unwirksam wird. Mit der Impedanzanpassung und der höchsten Spitzenleistung auf dem Markt überwindet Accent Prime diese Impedanz des Körpers, reduziert die Reflexion und bringt so die maximale Energie in das Zielgewebe ein.

Tief *UniPolar™ & AlmaWave*

Almas patentierte¹ Unipolar-Technologie dient zur **fokussierten, sicheren und tiefen Erwärmung** des Gewebes in variablen Tiefen der Haut. Unipolar arbeitet mit einer einzelnen Elektrode, die konzentrierte RF-Energie in tiefere Gewebeschichten einbringt - ohne unangenehme Begleiterscheinungen für die Patienten.


Die optimale Wellenlänge der AlmaWave mit 40,68 MHz bringt die Energie besonders wirksam und tief in das Gewebe ein.



Fokussiert *Tiefenkontrolle*

Durch Accent Primes Technologie zur Tiefenkontrolle lässt sich die Eindringtiefe der Energie und damit die Behandlungstiefe flexibel und präzise auf die relevanten Gewebeschichten anpassen, was die Ergebnisse der Behandlung optimiert.

Diese Auswahl von tiefen und oberflächlichen Ansätzen bietet für jeden Patienten und jedes Areal, je nach Indikation, Hauttyp und Dicke der Haut, individuell die ideale Behandlung. Die Kombination beider Ansätze auf dem selben Areal kann die Ergebnisse zudem noch weiter verbessern.

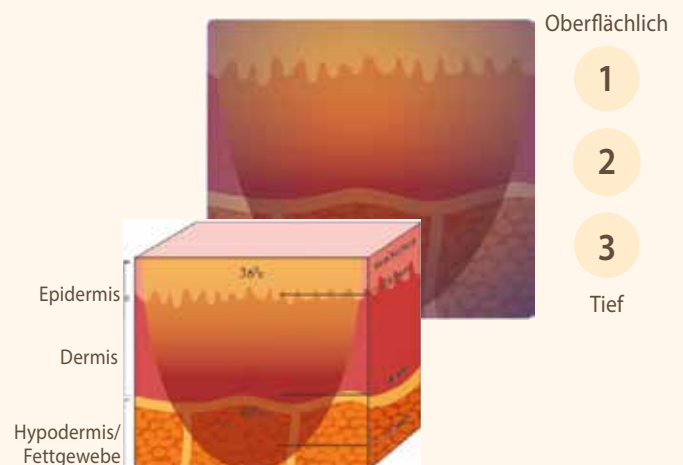

Gezielt gegen Fettzellen

Kavitation, Scher- und Flexuralwellen

Accent Prime bietet die patentierte² Kombination aus Kavitation, Scher- und Flexuralwellen zur selektiven Behandlung der Fettzellen ohne Schädigung des umliegenden Gewebes. Die Vibration der Scher- und Flexuralwellen zerreit die Membran der Fettzellen und lst die allmhliche Freisetzung von gespeichertem Fett aus, welches dann vom Krper ber das Lymphsystem abgebaut wird. Der Vorteil der Technologie liegt in der simultanen Emission dieser Wellen, wobei longitudinale Wellen die oberen Hautschichten erwrmen, whrend transversale Wellen tief bis in die Hypodermis vordringen.

Fraktioniert *Mikroplasma™*

Mit seiner einzigartigen Mikroplasma-Technologie bietet das Accent Pixel RF™ Handstck eine Behandlung zur Hautverjngung durch fraktionierte Ablation und Erwrmung des Gewebes. Dieser sanfte, fraktionierte Ansatz reduziert das Risiko von Nebenwirkungen wie der postentzndlichen Hyperpigmentierung (PIH). Die durch die Pixel RF-Technologie erzeugten Mikroverletzungen regen Selbstheilungsprozesse im Gewebe an und stimulieren mit der eingebrachten Wrme die Neubildung von Kollagen. Die umliegende Haut bleibt unberhrt, was den natrlichen Heilungsprozess frdert.

IMPACT™ (Transepidermale Durchdringung)

Das patentierte³ IMPACT™ Handstck nutzt Ultraschall-Energie, um aktive Substanzen ber die epidermal-dermale Hautbarriere hinaus tief in das Gewebe einzubringen. Zunchst erzeugt hier das Mikroplasma (Pixel RF) Handstck Mikro-Kanle in der Haut. IMPACT bringt dann durch intermittierenden positiven und negativen Schalldruck aufgetragene topische Wirkstoffe durch diese Mikro-Kanle und gegen den Druck der dort angestauten intrazellulren Flssigkeit in die Haut ein. Die oszillierende akustische Vibration erzeugt einen Push-Pull-Effekt in den Kanlen, welcher die gestaute Flssigkeit sowie die aktiven Substanzen tief in das Gewebe eindringen lsst.

INDIKATIONEN

Body & Face Contouring

Accent Prime bietet eine wirksame Lösung gegen Fetteinlagerungen und erschlaffte Haut, welche die Kontur von Gesicht und Körper sichtbar verbessert. Die Synergie aus RF- und Ultraschall-Technologien liefert hierbei wesentlich bessere Ergebnisse, als jede Technologie für sich genommen. Kalte Ultraschall-Wellen zerstören selektiv Fettzellen, unipolare RF-Energie beschleunigt den Stoffwechsel für eine schnellere Lymphdrainage. Die anschließende Applikation von warmer RF-Energie kontrahiert das Gewebe, strafft die Haut und verbessert ihre Textur durch den Aufbau von neuem Kollagen.

Handstücke



Accentuate

Zwei stationäre Applikatoren mit regulierbarer Wärmewirkung bringen RF-Energie in das Gewebe ein. Speziell designt zur Konturierung und Straffung großer Behandlungsareale.



UltraSpeed

Bietet eine neue Art von Ultraschall-Technologie mit geführten Ultraschall-Wellen sowie eine 88 mm große Applikatorplatte zur besonders schnellen Konturierung von großen Arealen am Körper.



MiniSpeed

Eine kleinere Version des UltraSpeed-Handstücks mit 55 mm großer Applikatorplatte zur Formung kleiner Arealen.



UltraFace

Vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie mit Kavitation zur Formung des Gesichts. Der Ultraschallkopf bringt die Energie tief in das Gewebe ein. Ideal für kleinere Arealen, beispielsweise im Gesicht.



UniBody

Kombiniert die hochenergetische UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren rotierenden Massagering. Die Behandlung erwärmt die tiefen Hautschichten und regt die Blutzirkulation im Unterhautgewebe an.



Vorher



Nach 2 Behandlungen



Vorher




Nach 7 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung der Klinischen Abteilung bei Alma

"Accent Primes innovatives UltraSpeed-Handstück bietet mir eine ideale Abdeckung des Behandlungsareals und eine äußerst kurze Behandlungszeit. Diese einzigartige Kombination ermöglicht exzellente klinische Ergebnisse und ist mittlerweile ein essentieller Bestandteil unseres Praxisangebots."

Dr. Carlos Trillo, Plastischer Chirurg, EstetizArte, Argentinien

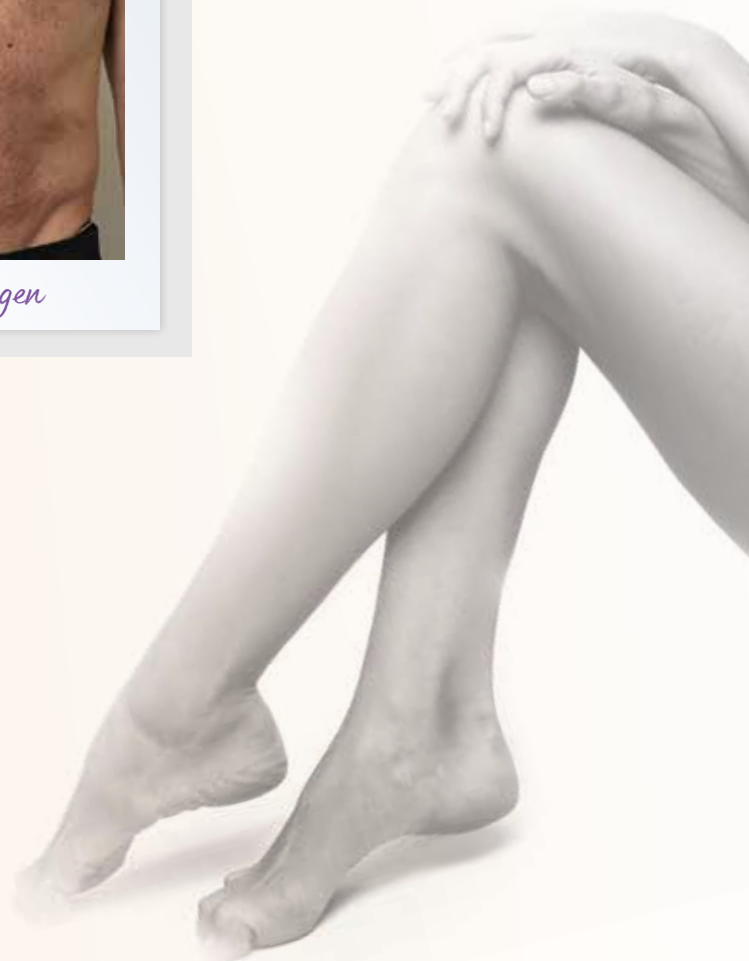

INDIKATIONEN

Hauterneuerung und Hautverjüngung

Ein ungleichmäßiger Teint, oberflächliche Pigmentveränderungen, Dehnungsstreifen und raue, unebene Haut lassen sich mit der Mikroplasma-Technologie des Accent Prime wirksam behandeln. Die Kombination mit IMPACT optimiert die Ergebnisse dieser Haut-Reparatur.

Handstücke



Microplasma

Pixel RF dient zur fraktionierten Ablation durch Mikroplasma sowie zur Erwärmung des Gewebes.



Microplasma + IMPACT

Kombiniert die Microplasma- und IMPACT Ultraschall-Technologien zum Einschleusen von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten.



Vorher



Nach 2 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Igor Pinson, MD & PhD, Dermatologe, Moskau, Russland




Vorher



Nach 1 Behandlung

Mit freundlicher Genehmigung von Choi Jun, MD, PhD, MayLin Clinic, Seoul, Korea

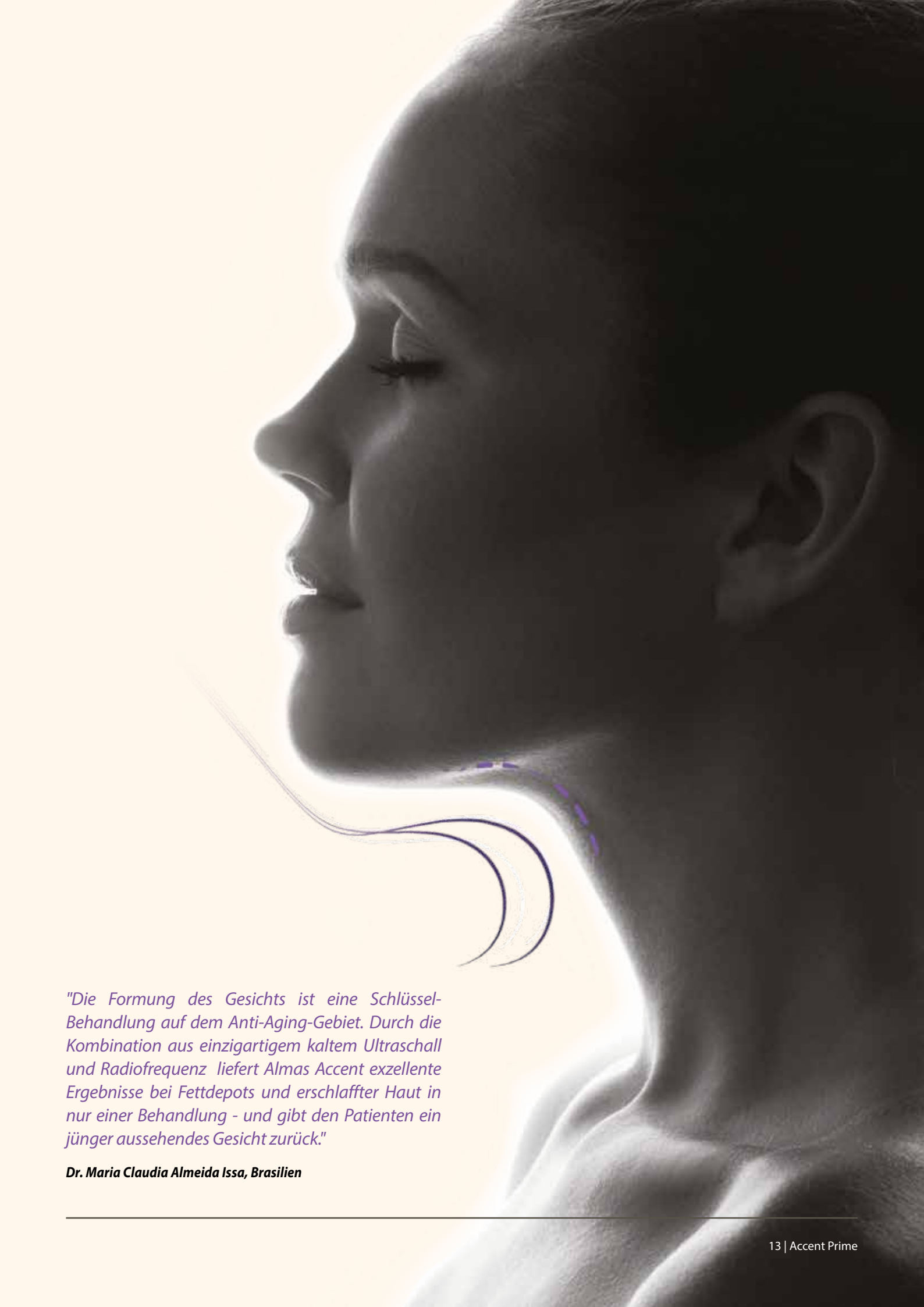

"Die Formung des Gesichts ist eine Schlüssel-Behandlung auf dem Anti-Aging-Gebiet. Durch die Kombination aus einzigartigem kaltem Ultraschall und Radiofrequenz liefert Almas Accent exzellente Ergebnisse bei Fettdepots und erschlaffter Haut in nur einer Behandlung - und gibt den Patienten ein jünger aussehendes Gesicht zurück."

Dr. Maria Claudia Almeida Issa, Brasilien

INDIKATIONEN

Hautstraffung

Altersbedingte Unebenheiten der Haut wie Falten und feine Linien sowie nachlassende Spannkraft sind oft eine echte Herausforderung – nicht aber für Accent Prime. Die Behandlung wirkt effektiv bei bestehenden Fältchen und erschlaffter Haut und wappnet die Haut zugleich besser gegen künftige Alterungsprozesse.

Handstücke

Handstücke für Behandlungen im Bewegungsmodus:



CoaxiPolar

Zur oberflächlichen, lokalen Erwärmung an sensiblen Arealen, bspw. im Gesicht. Mit Temperaturmessung in Echtzeit.



UniLarge

UniPolar RF-Handstück zur Straffung der Kollagen-Fasern in der Tiefe sowie zur Stimulation der Kollagen-Neosynthese.



UniFace

UniPolar RF-Handstück mit Massagering zur Behandlung des Gesichts.



Periorbital

Strafft erschlaffte Haut speziell im Bereich um die Augen.

Tune-Handstück

Vakuum-assistierte fraktionierte RF-Technologie zur Hautstraffung im Gesicht im stationären Behandlungsmodus:



TuneFace

Vakuum-assistierte fraktionierte RF-Technologie zur Hautstraffung im Gesicht.

Weitere Tune-Handstücke erhältlich für Behandlungen am Körper sowie periorbital.



Vorher



Nach 4 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sophia Bethge, Plastische Chirurgin, Metropolitan Aesthetics, Berlin

Cellulite

Vergrößerte Fettdepots unter der Hautoberfläche verursachen das unebene Hautbild der Cellulite. Durch die Kombination aus RF-Energie und mechanischer Massage kann Almas Accent Prime den Stoffwechsel in diesem Gewebe stimulieren, das Volumen der Fettzellen reduzieren, die Lymphdrainage anregen und so die Textur der Haut sichtbar glätten.

Handstücke



UniBody

Kombiniert die hochenergetische UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren rotierenden Massagering. Die Behandlung erwärmt tiefe Hautschichten, regt die Blutzirkulation im Unterhautgewebe an und verbessert so das Erscheinungsbild von Cellulite.



UniLarge

Nutzt UniPolar RF-Energie zur Anregung des Stoffwechsels im Fettgewebe und glättet so sichtbar die Haut.



Vorher



Nach 2 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Ramón H. Rosado, M.D, Mexiko



Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Revsan Mendenlioglu,
POUR FEMME Osnabrück

Accent *Prime*

Love Your Shape

IHRE VORTEILE

KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN

Kombinieren Sie die Technologien und Behandlungsmöglichkeiten für schnellere und länger anhaltende Ergebnisse in weniger Sitzungen.



SELEKTIV

Fokussierte, kontrollierte Behandlung in variabler Tiefe für optimale Ergebnisse ohne Schädigung des umliegenden Gewebes.



SICHER

Behandlungen mit Accent Prime sind sicher und wirksam bei allen Hauttypen (I-VI) und für alle Bereiche des Körpers, einschließlich empfindlicher Areale im Gesicht, am Hals und im Dekolleté.



KOMFORTABEL

Eine schrittweise Erwärmung und die integrierte Kühlung erhöhen spürbar den Patientenkomfort.



KEINE AUSFALLZEIT

Die Patienten können sofort wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99
info@alma-lasers.de
www.alma-lasers.de

© 2018. All rights reserved.

Accent, Alma, das Alma Firmenzeichen, Alma Lasers, Accent Prime, Accentuate, UltraSpeed, MiniSpeed, TuneFace, TuneBody, Impact, Microplasma, Pixel, Unipolar, AlmaWave und Shear Waves™ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Alma Lasers in den USA und/oder anderen Ländern.

www.almaaccent.de

Alma™

Folgen Sie
Alma Lasers



¹Alma Accent Unipolar RF ist geschützt durch US-Patente Nr. 7630774, 8150532 und Europäisches Patent Nr. 1715810. Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern. ²Alma Accent Ultra Produkte sind geschützt durch US-Patent Nr. 8579835 und Europäisches Patent Nr. 2252369. Weitere Patente ausstehend in den USA und/oder anderen Ländern. ³Alma Accent Impact Produkte sind geschützt durch Europäisches Patent Nr. 2459268; Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern.